

FOIRE AUX QUESTIONS

1) Quel est le mécanisme d'action d'IceWave étant donné que rien n'entre dans le corps? Il s'agit d'un patch non-transdermique (appelé également timbre). Sa nouvelle technologie consiste à stimuler délicatement les points d'acupuncture, afin d'améliorer le flux d'énergie dans l'organisme et de soulager les courbatures et douleurs mineures. Aucun médicament, stimulant, aimant ou aiguille n'est utilisé.

2) Pourquoi ma douleur n'est-elle pas soulagée?

La cause la plus courante est la déshydratation. Buvez un ou deux verres d'eau et attendez 20 à 30 minutes avant d'appliquer les patchs. Une autre cause fréquente est le mauvais placement des patchs. L'utilisation des patchs IceWave pour soulager la douleur demande de la pratique. Suivez les instructions de la méthode de l'horloge. Si vous avez respecté les instructions et n'avez pas obtenu de soulagement de votre douleur, essayez de placer les patchs sur la plante du pied (Rein 1).

3) Quand faut-il utiliser le patch Blanc sur le point douloureux plutôt que le patch Beige? Ne placez le patch BLANC sur le point douloureux qu'APRÈS avoir essayé de mettre le patch BEIGE sur le point douloureux avec la méthode de l'horloge. Suivez ensuite les instructions de la méthode de l'horloge, en plaçant le patch BLANC sur le point de douleur au lieu du patch BEIGE.

4) Comment appliquer les patchs pour soulager une douleur affectant tout le corps? Placez le patch BLANC sur la plante du pied DROIT et le patch BEIGE sur la plante du pied GAUCHE. (Rein 1)

5) Combien de patchs peut-on porter pour soulager la douleur? Vous pouvez utiliser jusqu'à deux paires de patchs. Placez une paire de patchs sur la plante du pied au point Rein 1 (patch BLANC sur pied DROIT, patch BEIGE sur pied GAUCHE) et une paire de patchs sur les coudes au point Cœur 3 (patch BLANC sur coude DROIT, patch BEIGE sur coude GAUCHE).

6) Est-ce que l'utilisation des patchs est sans danger? L'acupuncture est pratiquée depuis des millénaires pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. L'innocuité de nos produits est prouvée. Toutefois, si à tout moment vous ressentez un malaise ou une gêne, retirez les patchs et buvez beaucoup d'eau.

7) Y-a-t-il eu des tests indépendants réalisés sur ces patchs? Oui, les essais cliniques avec imagerie infrarouge médicale confirment l'effet rapide et significatif d'IceWave pour soulager la douleur. Visitez www.lifewave.com/french pour plus d'informations.

8) Pendant combien de temps est-il possible de porter une paire de patchs? Il est conseillé de ne pas porter les patchs pendant plus de 12 heures par jour. Ne réutilisez pas les patchs, utilisez une nouvelle paire chaque jour.

FAQ – suite...

9) Est-ce que tout le monde peut utiliser IceWave? En cas de problème de santé ou de doute, consultez votre médecin avant d'utiliser IceWave. N'utilisez pas les patchs pendant la grossesse ou l'allaitement.

10) Où doit-on appliquer les patchs pour la douleur au genou? Placez le patch BEIGE à l'intérieur du genou et le patch BLANC à l'extérieur du genou.



TÉMOIGNAGES

« Je souffrais d'une douleur au pied droit depuis plus de 18 mois. J'ai consulté trois médecins, mais sans résultat. En 30 secondes, ma douleur au pied avait disparu. ÇA MARCHE ! » - **Andy F.**

« Je souffrais d'une douleur (lombaire) depuis 5 ans. En 30 secondes, ma douleur avait disparu en collant le patch IceWave sur ma chemise. C'est vraiment fantastique ! » - **Tony D, SC**



« Depuis plus de 5 ans, je prenais 15 antidouleurs puissants par jour pour une pathologie osseuse de la hanche gauche. Grâce à IceWave, j'ai repris le contrôle de ma vie. Je ne laisserai plus la douleur contrôler ma vie. J'ai été faire un tour de vélo, ce que je n'avais pas fait depuis des années, et j'ai nettoyé ma maison de fond en comble. Je souhaite transmettre le message à propos de cette société et d'IceWave à qui voudra l'entendre. » - **Dave S.**

« Il y a 4 ans, en pourchassant un suspect, je me suis fait renverser par une voiture. Mon genou droit était brisé. Une minute après avoir placé les patchs IceWave sur mon genou, la douleur avait disparu. J'aurais l'impression de trahir tout mon entourage si je ne leur parlais pas de LifeWave. »
- **Keith C., Policier à la retraite**

TÉMOIGNAGES, suite...

« Mon dos me faisait mal depuis si longtemps que j'étais prête à tout essayer. Sur une échelle de 1 à 10, ma douleur était un 9 ou 10. Chose incroyable, en 22 secondes ma douleur avait disparu. »
- **Ethel S.**

« Je me suis fait renverser par une voiture en traversant la rue à Greensboro, NC il y a 16 ans. Je souffre d'une douleur chronique dans les hanches. Au fil des années, j'ai essayé plusieurs choses mais rien n'y faisait. Une bonne amie à moi m'a parlé des patchs IceWave de LifeWave et en 4 minutes, ma douleur chronique était soulagée. »
- **Tina C.**



« J'étais inscrit à la compétition de golf de charité par les célébrités du NFL. Pendant ma préparation, je me suis froissé un muscle du thorax et un spasme dans le dos lancinant m'a littéralement coupé le souffle. À ce moment là, j'étais certain que je ne seulement je ne jouerai pas au golf, mais que je n'arriverais pas à le relever. J'ai placé un patch blanc sur mon sternum et deux patchs sur la zone de ma cage thoracique gauche dans le dos. Je me suis rallongé immédiatement par terre pendant

environ 4 minutes.

La douleur avait déjà énormément diminué et 20 minutes plus tard, j'étais complètement mobile. J'ai participé à la compétition. Mais ce n'est pas tout : non seulement j'ai joué sans ressentir de douleurs pendant toute la compétition, mais j'ai également remporté le concours du plus long drive sur un trou ! Si je n'avais pas eu ces patchs, je suis certain que je n'aurais pas pu jouer du tout. J'ai déjà eu ce type de blessure dans le passé et il m'avait fallu 2 semaines pour m'en remettre. Incroyable ! Merci LifeWave !!! »
- **Joe P., ancien de NFL**

« J'étais alitée avec des coussins placés sous mes genoux à cause de fortes douleurs au dos. Mon fils Gregory a placé ces patchs sur moi, et en un rien de temps, j'étais sur pied, demandant à tout le monde de m'appeler. ... je vais leur dire que ces patchs marchent vraiment. »
- **Ms. Hinton G., NC**

« Sur une échelle de 1 à 10, ma douleur au dos était un 5. En 20 secondes, elle avait disparu. Je souffrais également d'une douleur à la main droite et après avoir appliqué IceWave, elle avait disparu en moins de 30 secondes. C'est incroyable. » - **John G., SC**

Pour plus d'informations à propos de LifeWave®, veuillez contacter :

LIFEWAVE®

icewave®

Pour une stimulation
délicate et transitoire
des points d'acupuncture

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
POUR SOULAGER LA DOULEUR

PRÉSENTATION D'ICEWAVE

Imaginez un soulagement de la douleur rapide et sans médicament. Imaginez maintenant que cette possibilité s'offre à vous avec LifeWave.

Notre système exclusif de patch non-transdermique utilise une nouvelle technologie consistant à stimuler délicatement les points d'acupuncture, améliorant ainsi littéralement le flux d'énergie dans votre corps pour soulager la douleur et l'inconfort, en quelques minutes !



UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR SOULAGER LA DOULEUR

Nous avons tous l'idée préconçue qu'il faut mettre quelque chose dans notre corps (des vitamines, par exemple) pour favoriser la santé. Une bonne alimentation, une consommation d'eau suffisante et l'exercice physique sont essentiels à un mode de vie sain, mais notre organisme nécessite également un flux continu d'énergie. Par exemple, le cerveau et les nerfs transmettent des signaux électriques aux muscles pour qu'ils exploitent l'énergie chimique en réserve afin de se contracter.

On sait depuis des milliers d'années que certaines fréquences lumineuses peuvent provoquer des changements particuliers dans le corps humain. Lors des expositions au soleil, une fréquence lumineuse déclenche la production de vitamine D par l'organisme. Une autre fréquence lumineuse (UV) déclenche la production de mélanine (l'agent chimique qui permet à la peau de bronzer).

Les patches IceWave exploitent ces connaissances pour stimuler les points d'acupuncture sur le corps afin d'améliorer le flux d'énergie et soulager la douleur en quelques minutes, sans médicament.

MODE D'EMPLOI D'ICEWAVE

La « méthode de l'horloge » pour le placement des patches IceWave a été mise au point pour procurer le soulagement de la douleur le plus rapide et le plus efficace.

Commencez par situer la zone la plus douloureuse. Suivez les étapes ci-dessous jusqu'à une réduction importante de la douleur et/ou une augmentation de la mobilité. Si vous souffrez d'une douleur générale affectant tout le corps, placez le patch au point Rein 1.

ÉTAPE 1



Placez un patch IceWave BEIGE directement sur le point où vous éprouvez la douleur la plus forte.

ÉTAPE 2



Déplacez le patch BLANC AU DESSUS de la douleur. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.

ÉTAPE 3



Déplacez le patch BLANC sur la position 3 heures. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.



ÉTAPE 4

Déplacez ensuite le patch BLANC sur la position 6 heures. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.



ÉTAPE 5

Ensuite, déplacez le patch BLANC sur la position 9 heures. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.




ÉTAPE 6

Enfin, placez le patch BLANC dans une position parallèle au patch BEIGE. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, suivez les instructions ci-dessous.

REIN 1



CŒUR 3

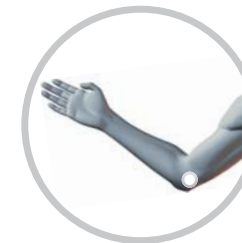

Douleur dans tout le corps - placez un patch BLANC sur la plante du pied droit et un patch BEIGE sur la plante du pied gauche (Rein 1). Vous pouvez appliquer une deuxième paire de patches sur les coudes au Cœur 3.

AVERTISSEMENTS : Retirer immédiatement en cas d'inconfort ou d'irritation de la peau. Ne pas réutiliser le patch qui a été décollé de la peau. Ne pas utiliser plus de 2 paires de patches en même temps sur le corps. Bien s'hydrater en buvant de l'eau pendant l'utilisation des patches. Réservé à l'usage externe. Ne pas ingérer. Ne pas utiliser sur des blessures ou une peau abîmée. En cas de problème de santé, demander l'avis d'un professionnel de la santé avant d'utiliser les patches. Ne pas utiliser les patches pendant la grossesse ou l'allaitement. Ces informations n'ont pas été évaluées par la FDA, l'organisme américain de surveillance des aliments et des médicaments. Ce produit n'est pas indiqué pour le diagnostic, le traitement, la guérison ou la prévention d'aucune maladie. *Les résultats varient en fonction des individus.

QU'EST-CE QUE L'ACUPONCTURE ?

L'acupuncture est un art oriental de la guérison, basé sur la médecine traditionnelle de l'Orient. En général, un acuponcteur stimule les points d'acupuncture sur la surface du corps avec des aiguilles ou une pression, afin d'améliorer le sommeil, soulager la douleur et l'inconfort, et favoriser la santé.

Les patches autocollants IceWave utilisent les principes de la médecine orientale et de l'acupuncture sans aiguille. Ils stimulent délicatement les points sur le corps ayant été utilisés depuis des millénaires pour équilibrer et améliorer le flux d'énergie dans le corps humain. Le résultat : une façon naturelle d'améliorer votre qualité de vie sans l'aide de médicaments, de stimulants ou d'aiguilles qui pénètrent dans le corps.

ICEWAVE® PRODUIT DES RÉSULTATS

Les photographies ci-dessous proviennent d'essais cliniques réalisés avec IceWave. La plupart des personnes qui utilisent IceWave et suivent la « méthode de l'horloge » obtiennent des résultats positifs dès les premières minutes d'utilisation.

